



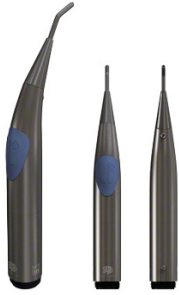
Reach for the Stars — met StarzTipz®

kleurrijk - veelzijdig - individualiseerbaar - vermindert kruisbesmetting



We helpen je om de juiste meerfunctiespuit correct te identificeren, sturen je een sample, geven je een vergelijking tussen StarzTipz® en concurrerende producten* en leveren je de juiste conversiekit (indien nodig) om de overstap zo soepel en gemakkelijk mogelijk voor je te maken.

*zie QR-code op de laatste pagina van deze flyer

			
Conversieset Cefla Anthos F3/F6 QRNT1030	Conversieset Cefla SP QRNT1035	Conversieset Faro SM03 QRNT1100	Conversieset Kavo Estetica QRNT1092
			
Conversieset Kavo K4 QRNT1090	Conversieset Luzzani Minibright QRNT1055	Conversieset Luzzani Minilight QRNT1050	Conversieset Luzzani Minimate QRNT1051
			De artikelnummers hebben alleen betrekking op de StarzTipz® adapters
Conversieset Quick Release ADEC/UNIC QRNT1000	Conversieset Sirona Sprayvit 4000 QRNT1071	Conversieset Sirona Sprayvit C8 QRNT1070	

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over StarzTipz®. Ons doel is om je snel en duidelijk van alle belangrijke informatie te voorzien. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

01. Wat is het voordeel van onze ontwerp met „6 luchtkanalen“?

Door de 6 kleine luchtkanalen is de tandheelkundige lucht geconcentreerder en wordt deze door elk van de 6 kanalen verspreid, waardoor je een meer gerichte straal door elk kanaal krijgt. Dat zorgt voor een krachtigere tandheelkundige luchtspray.

02. Wat is er speciaal aan het HP-opzetstuk?

Met zijn lengte van 65 mm en dubbele kamers biedt het High-Pressure (HP) opzetstuk een krachtiger, geconcentreerder spraybeeld en is het ideaal voor het reinigen en onderzoeken van diepe parodontale pockets. Het is 30 mm korter dan het originele opzetstuk en is ideaal voor gebruik bij jonge patiënten en om dicht bij de plaats van behandeling te werken. De kortere lengte is vergelijkbaar met die van conventionele hulpstukken die met stoom kunnen worden gesteriliseerd, waardoor het eenvoudiger is om over te stappen op hulpstukken voor eenmalig gebruik.

03. Werkt deze tip op mijn meerfunctiespuit?

We hebben een reeks adapters die op veel meerfunctiespuiten passen.

04. Kan ik er echt zeker van zijn dat StarzTipz® een nauwkeurige scheiding van lucht en water garandeert?

Als je technische apparatuur volledig functioneert, garanderen we 100% scheiding van lucht en water en zit het StarzTipz® opzetstuk stevig op de meerfunctiespuit dankzij de O-ringvergrendeling. Bovendien kun je dankzij de transparante buitenste schacht van de StarzTipz® gemakkelijk zien of er water in de luchtkamer terecht is gekomen. Lekkageproblemen zijn voor 99% te wijten aan versleten O-ringen, onjuiste montage van het hulpstuk of gebruik van het hulpstuk met een niet-compatibele adapter.



Originele tip (95 mm)

Afgeschuimde randen aan beide uiteinden garanderen de veiligheid van de patiënt en voorkomen ook overmatige slijtage van de O-ringen aan de oorspronkelijke tip (95 mm).

HP tip (65 mm)



6 luchtkanalen



Hogedruk
dubbel kanaal



O-ringgroef voor
stevige grip



De twee onderdelen zijn gemaakt van FDA-goedgekeurd plastic en zorgen voor een volledige scheiding van lucht en water.

StarzTipz® Belangrijkste kenmerken

- ★ Onmiddellijke scheiding van lucht en water
- ★ Flexibele kunststof, vormvast.
- ★ Wereldwijde compatibiliteit dankzij bijpassende adapterkits
- ★ Slank ontwerp voor optimaal zicht in de mondholte
- ★ Verminderd risico op kruisbesmetting

Overstappen naar StarzTipz® is eenvoudiger dan je denkt!

Selecteer het model van je meerfunctie spuit en vind de juiste adapter en O-ring kit om je spuitsysteem om te bouwen naar StarzTipz®.



→ Stap nu over op
StarzTipz®!