



# Greifen Sie nach den Sternen – mit StarzTipz®

**farbenfroh – vielseitig – individualisierbar – reduziert Kreuzkontamination**



Wir unterstützen Sie bei der korrekten Bestimmung Ihrer Spritze, senden Ihnen ein Probemuster, erstellen für Sie einen Vergleich zwischen Starz Tipz® und Konkurrenzprodukten\* und liefern Ihnen das passende Umrüstungsset (falls erforderlich), um den Wechsel für Sie so reibungslos und einfach wie möglich zu gestalten.

\*siehe QR-Code auf der letzten Seite dieses Flyer

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| Umrüstungs Set<br>Cefla Anthos F3/F6<br>QRNT1030                                    | Umrüstungs Set<br>Cefla SP<br>QRNT1035                                              | Umrüstungs Set<br>Faro SM03<br>QRNT1100                                              | Umrüstungs Set<br>Kavo Estetica<br>QRNT1092                                           |
|  |  |  |  |
| Umrüstungs Set<br>Kavo K4<br>QRNT1090                                               | Umrüstungs Set<br>Luzzani Minibright<br>QRNT1055                                    | Umrüstungs Set<br>Luzzani Minilight<br>QRNT1050                                      | Umrüstungs Set<br>Luzzani Minimate<br>QRNT1051                                        |
|  |  |  | Die Artikelnummern<br>beziehen sich nur auf die<br>Starz Tipz® Adapter                |
| Umrüstungs Set<br>Quick Release ADEC/UNIC<br>QRNT1000                               | Umrüstungs Set<br>Sirona Sprayvit 4000<br>QRNT1071                                  | Umrüstungs Set<br>Sirona Sprayvit C8<br>QRNT1070                                     |                                                                                       |

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen rund um StarzTipz. Unser Ziel ist es, Ihnen alle wichtigen Informationen schnell und übersichtlich bereitzustellen. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

## 01. Welchen Vorteil hat unser Design mit 6 Luftkanälen?

Bei 6 schlanken Luftkanälen wird die Luft stärker gebündelt durch jeden einzelnen Kanal abgegeben, so dass aus jedem Kanal ein fokussierter Spraystrahl austritt. Die Folge ist ein leistungsstärkerer Luftspray.

## 02. Was ist die Besonderheit beim HP-Aufsatz?


Mit seiner Länge von 65 mm und den Doppelkammern bietet der High-Pressure (HP)-Aufsatz ein leistungsstärkeres, gebündeltes Spraybild und eignet sich optimal für die Reinigung und Untersuchung von tiefen Parodontaltaschen. Er ist 30 mm kürzer als der Originalaufsatz und bietet sich gut für den Einsatz bei jungen Patienten und das Arbeiten nahe der Behandlungsstelle an. Die kürzere Länge ist ähnlich wie bei herkömmlichen dampfsterilisierbaren Aufsätzen und erleichtert somit den Wechsel zu Einwegaufsätzen.

## 03. Funktioniert diese Spitze auf meiner Spritze?

Wir haben eine Reihe von Konvertern, die zu vielen Spritzen passen.

## 04. Kann ich mir wirklich sicher sein, dass mit Starz Tipz® eine genaue Trennung von Luft und Wasser gewährleistet ist?

Wenn Ihre technische Ausstattung voll funktionsfähig ist, garantieren wir eine 100%ige Trennung von Luft und Wasser. Durch die O-Ring-Arretierung sitzt der Starz Tipz® Aufsatz fest auf der Spritze. Außerdem können Sie dank des durchsichtigen Außenschafts der Starz Tipz® leicht erkennen, ob Wasser in die Luftkammer eingedrungen ist. Leckageprobleme sind zu 99 % auf verschlissene O-Ringe, unsachgemäße Montage des Aufsatzes oder die Anwendung des Aufsatzes mit einem nicht kompatiblen Adapter zurückzuführen.

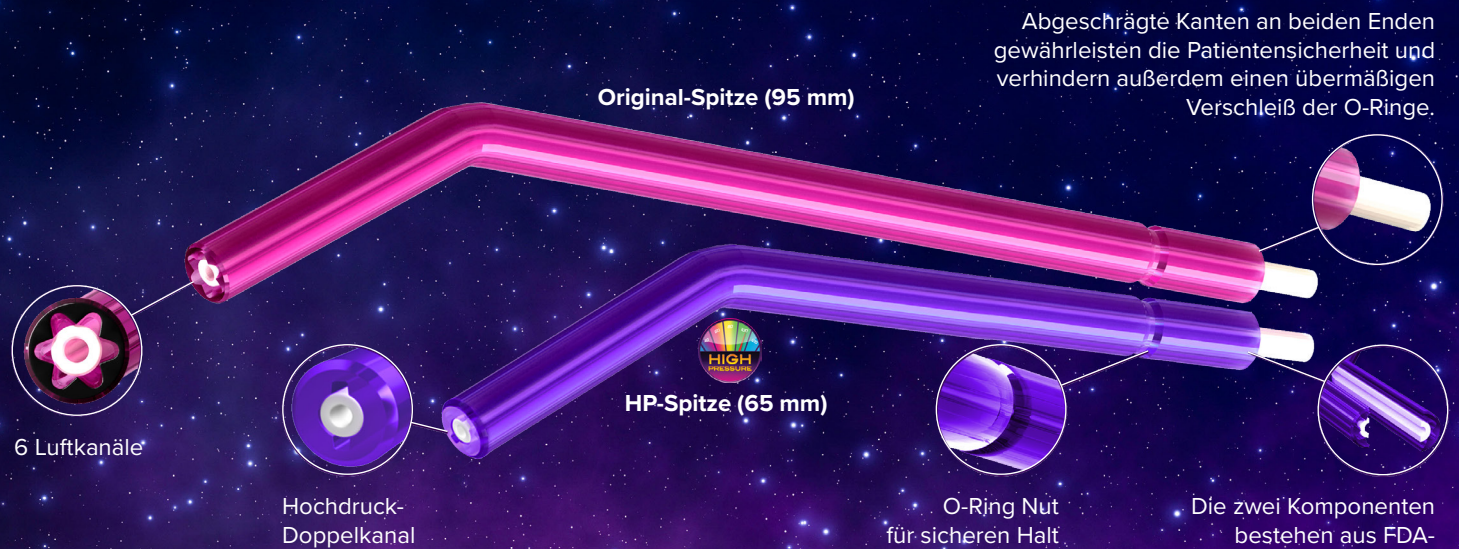

## Starz Tipz® Key Features

- ★ Sofortige Trennung von Luft und Wasser
- ★ Biegsamer Kunststoff, behalten Form bei
- ★ Weltweite Kompatibilität durch passende Adapter-Kits
- ★ Schlankes Design für optimale Sicht in den Mundraum
- ★ Reduziertes Risiko für Kreuzkontamination

# Ihr Wechsel zu Starz Tipz® ist einfacher als Sie glauben!

Wählen Sie das Modell Ihrer Luft/Wasser-Spritze und finden Sie den für Sie passenden Adapter sowie das zugehörige O-Ring Kit, um Ihr Spritzensystem auf StarzTipz® umzurüsten.



Jetzt Wechsel zu  
Starz Tipz® starten!